

Specifiche tecniche:

Ingresso dell'adattatore di alimentazione.....	100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz
Ingresso dell'unità principale.....	200VA
Frequenza.....	30kHz±5kHz
Pressione dell'aria in ingresso	5.5 bar-7.5 bar (0.55Mpa-0.75Mpa)
Temperatura dell'acqua.....	≤45°C
Uscita della polvere	0.1g/min-8g/min
Dimensioni	320*330*120mm
Peso.....	4.0 Kg



Clean&White
Xpower

Dispositivo avanzato 2 in 1 per l'igiene orale professionale

C&W Xpower unisce
un manipolo ablatore ad ultrasuoni ad alta frequenza
con fibra ottica al lucidatore ad aria ad elevata performance
con commutazione automatica
tra i due sistemi in base al manipolo impugnato.

5 modalità operative: General scaling, Perio, Endo, Air polishing e Cleaning

C&W Xpower permette una rapida e confortevole rimozione
di calcoli dentali, pigmentazioni, placca, depositi morbidi,
tartaro e macchie dalle superfici dentali,
manufatti protesiti, impianti ed attacchi ortodontici.
Il programma di pulizia permette una facile manutenzione
del dispositivo mantenendolo sempre efficiente e pronto all'uso.



5 manipoli con kit di sterilizzazione

S - Scaling

Manipolo per ablazione
supra-sub gengivale,
chiave dinamometria, cassetta

AP - Air Polishing

Manipolo per lucidatura ad aria
supra gengivale,
cassetta

PAP - Perio Air Polishing

Manipolo per lucidatura ad aria
sub gengivale ed interprossimale,
20 terminali monouso



S
2x



AP
2x



PAP
1x



Sistema di controllo touch screen LCD

L'ampio ed elegante pannello LCD 7 pollici di C&W Xpower permette una facile visione ed implementazione dei comandi, con possibilità di regolare, in modo accurato e con un semplice tocco, la potenza della vibrazione, flusso delle polveri ed il flusso dell'acqua.



Pedale multifunzionale wireless

C&W Xpower identifica e commuta automaticamente il pedale tra cablato e wireless.

Il pedale presenta comandi multi-funzione facili da operare.

La tecnologia bluetooth 5.0 ULP assicura un basso consumo e tempi di stand-by ultra-lunghi.



Modalità
Senza Acqua

BOOST

Modalità
Boost



Modalità
Pulizia



Serbatoio per la polvere con camera ad imbuto per un getto uniforme

Il serbatoio plug-and-play di C&W Xpower è facile da installare e pratico da caricare con la polvere. Il design aerodinamico a doppio radiante del serbatoio C&W Xpower assicura un getto uniforme e l'elevata efficacia del trattamento.

Sistema ad alta performance senza intasamenti

Equipaggiato con un dispositivo di filtraggio per assicurare aria asciutta ed evitare che la polvere si inumidisca, lo speciale ugello con controllo del processo di C&W Xpower riduce efficacemente l'intasamento evitando che la polvere si inumidisca attraverso il riflusso dell'acqua.




Ampio serbatoio per l'acqua e le soluzioni, facile da ricaricare

Il serbatoio dell'acqua da 800ml di C&W Xpower riduce la necessità di ricaricare l'acqua, rendendo comunque facile e veloce l'operazione.

C&W Xpower permette l'utilizzo di soluzioni chimiche come perossido d'idrogeno, ipoclorito di sodio e clorexidina per aumentare l'efficacia clinica del trattamento.

Le speciali pastiglie C&W Tabs assicurano un gradevole sapore ed una perfetta manutenzione dell'impianto idrico.

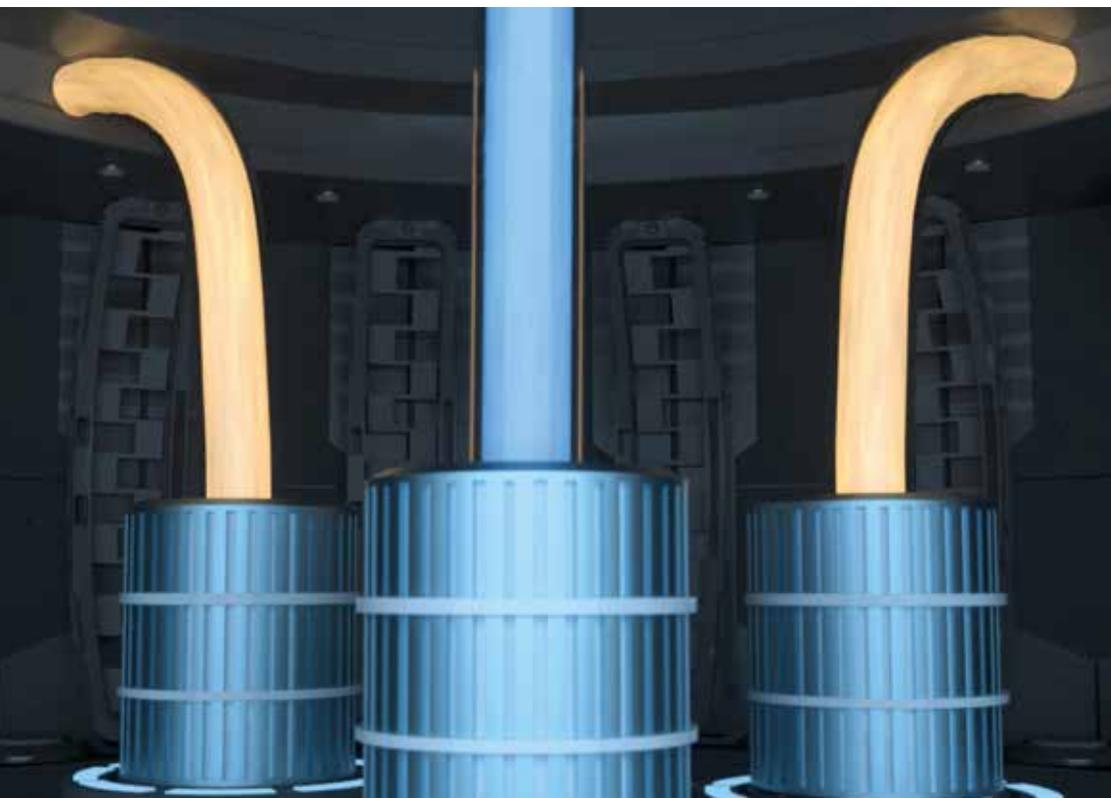

Controllo automatico della temperatura dell'acqua per il comfort del paziente

C&W Xpower è dotato di un impianto di riscaldamento automatico che mantiene l'acqua a temperatura omoterica (30°C) per assicurare una performance stabile ed un trattamento confortevole.

Vibrazione elittica per un'ablazione e lucidatura confortevole

C&W Xpower è dotato di un sistema automatico di tracciamento della frequenza, in base alla punta utilizzata e un'elevata frequenza con micro oscillazione (1-90μ) equivalente ad 1/3 del diametro di un capello.

La vibrazione con traiettoria ellittica attenua l'impatto sul dente e previene lo stimolo doloroso assicurando una ablazione estremamente confortevole per il paziente.


Speciali punte per ablazione super delicate

Puntale Perio in titanio (P59T)

per trattamento mininvasivo del cemento radicolare

Puntale rivestito (P90)

ultra delicato per la pulizia di impianti

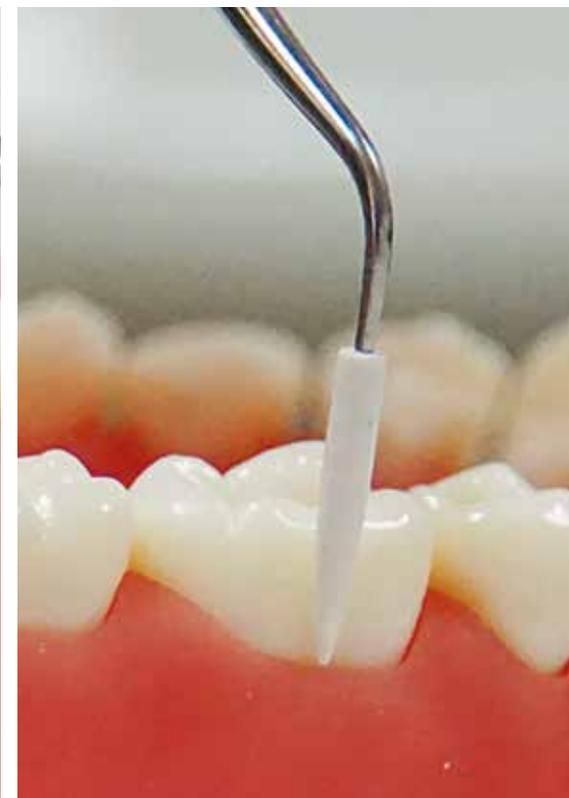

Ampia dotazione di serie

C&W Xpower ha un'ampia dotazione di serie inclusa:

- **5 manipoli:**
 - 2 Scaling (S),
 - 2 Air Polisher (AP),
 - 1 Perio Air Polisher (PAP)
- **2 serbatoi per le polveri:**
 - 1 per polveri FAST (65m μ),
 - 1 per polveri MILD (\leq 25m μ)
- **12 punte per ablatore:**
 - 1 per ablazione sopragengivale (G4),
 - 3 per ablazione subgengivale (P1, P3, P4),
 - 1 punta super confortevole in titanio per ablazione subgengivale (P59T),
 - 2 punte per levigatura radicolare (P2R, P2L),
 - 1 punta con terminale morbido per la pulizia di impianti (P95)
 - 4 punte endodontiche (E3, E3D, E6, E62)
- **2 polveri (bicarbonato 65m μ , glicina 65m μ)**
- **20 puntali perio monouso (manipolo PAP)**
- **4 cassette per sterilizzazione**
- **2 chiavi dinamometriche**
- **Set di aghi per la pulizia**
- **Pedale wireless**
- **Cavi, attacchi, accessori e ricambi**

REF 540300

Clean&White XPower

Ultrasonic Scaler & Air Polisher

CE 0123

